


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

1

SẠC PIN TRONG VÒNG 24 GIỜ
CHO LẦN ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG

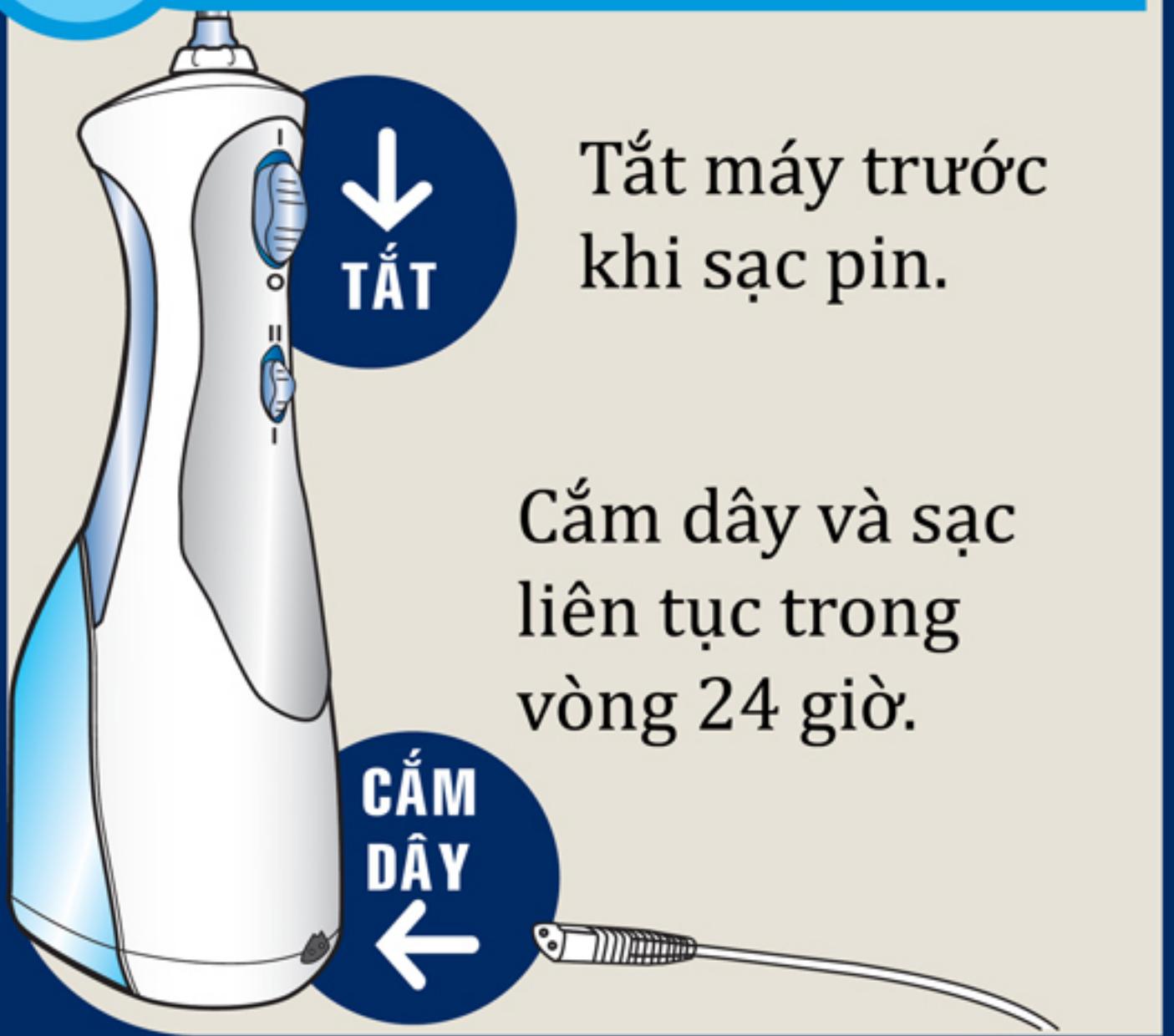

Tắt máy trước
khi sạc pin.

Cắm dây và sạc
liên tục trong
vòng 24 giờ.

2

GẮN ĐẦU TĂM

Chọn đầu tăm thích hợp.
Gắn vào máy cho đến
khi nghe tiếng “click”.



Lưu ý: không nhấn nút
thay đầu tăm trong suốt
quá trình sử dụng.

3

CHUẨN BỊ NƯỚC




Tháo dây sạc
ra khỏi máy
khi đổ nước
và trong khi
sử dụng.



Tháo nắp phía trên
bình chứa và đổ
nước hơi ấm vào.

4

ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC

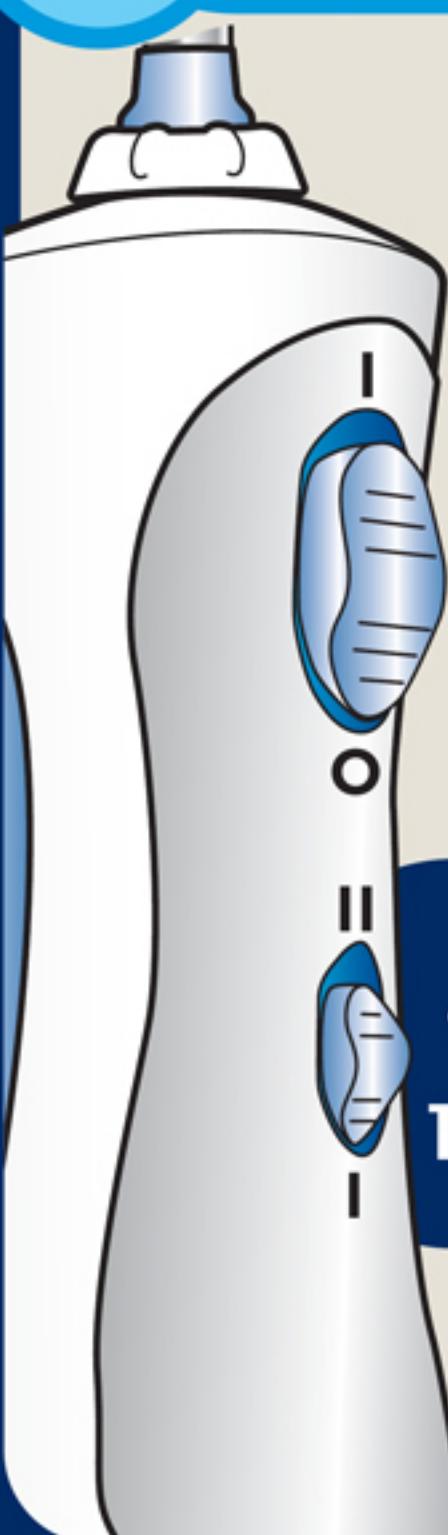

Điều chỉnh áp lực
nước ở mức thấp
(I) khi bắt đầu
sử dụng.


**Nút điều chỉnh
áp lực nước**

Điều chỉnh lên
mức cao **(II)** để
tăng áp lực nước.

5 THAO TÁC TẮT/MỞ MÁY

Lưu ý: Luôn đặt đầu tăm vào miệng trước khi mở máy.


Đặt đầu tăm vào miệng, cúi người, mím môi đủ để nước không bắn ra ngoài.
MỞ MÁY.

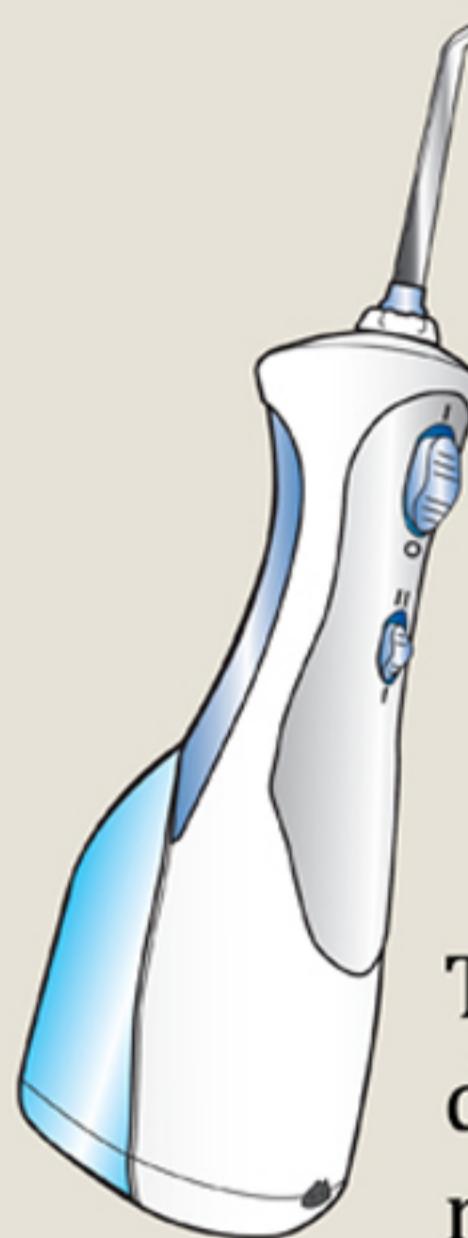

Trong quá trình sử dụng, không để máy nằm nghiêng.

6 CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ

Hướng đầu tăm sao cho tia nước vuông góc với răng.

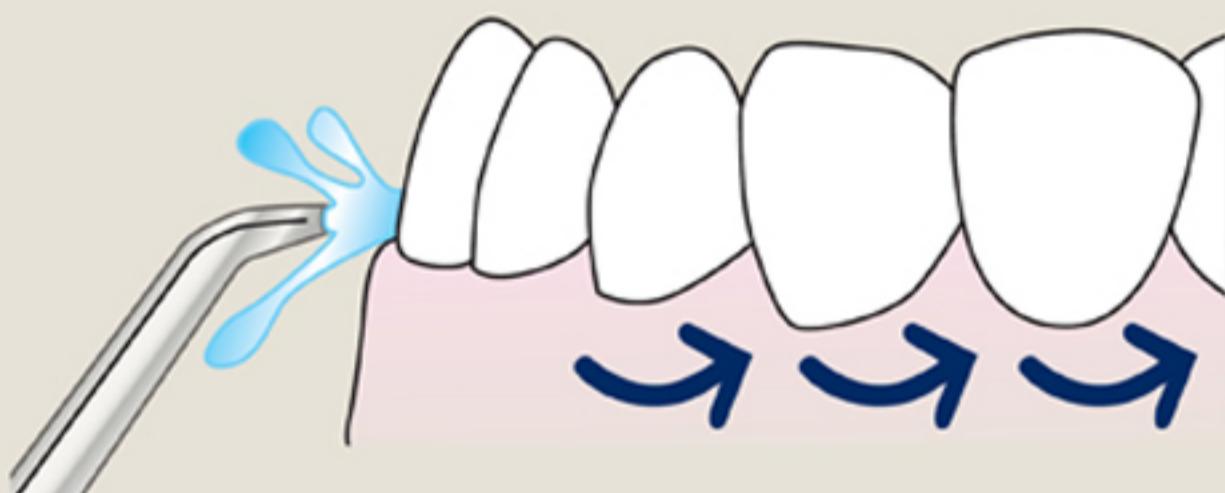

Bắt đầu với răng ở trong cùng, di chuyển đầu tăm theo đường nướu. Dừng lại một thời gian ngắn giữa các kẽ răng.

7 KẾT THÚC



Tắt máy và đổ hết nước trong bình ra.