


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

1

CHUẨN BỊ BÌNH CHỨA NƯỚC

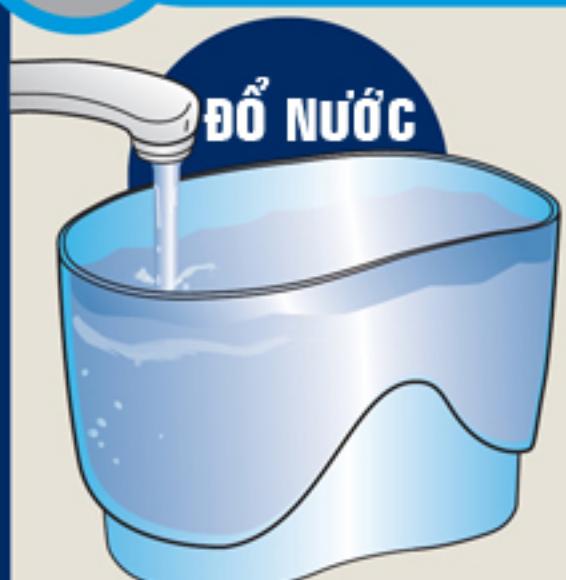


Lấy bình nước ra khỏi máy và cho nước hơi ấm vào.



Gắn bình nước trở lại thân máy, **ẤN BÌNH NƯỚC** để gắn chặt với thân máy.

2

CHỌN VÀ LẮP ĐẦU TĂM

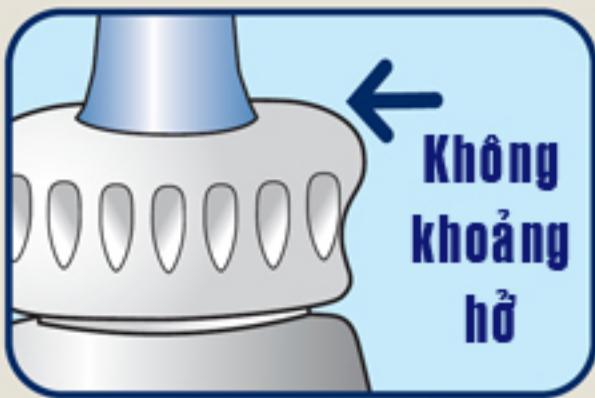

Chọn đầu tăm thích hợp. Gắn đầu tăm thật chặt vào tay cầm.

3

CHUẨN BỊ MÁY

Chỉ thực hiện với máy sử dụng lần đầu.

Chỉnh công suất ở mức cao, hướng đầu tăm xuống dưới. Mở máy cho đến khi có tia nước ở đầu tăm. Sau đó tắt máy.

**4**

CHỈNH ÁP LỰC VÀ TẠM DỪNG

Chỉnh áp lực ở mức thấp nhất, sau đó tăng dần đến mức phù hợp.



Bạn có thể tạm dừng tia nước bằng cách ấn nút tạm dừng trên tay cầm.




thả nút để tiếp tục

5

SỬ DỤNG MÁY TĂM NƯỚC

Luôn đặt đầu tăm trong miệng trước khi mở máy

Đặt đầu tăm vào trong miệng, cúi người xuống bồn nước. Mím môi đủ để nước không bắn ra. Mở máy.

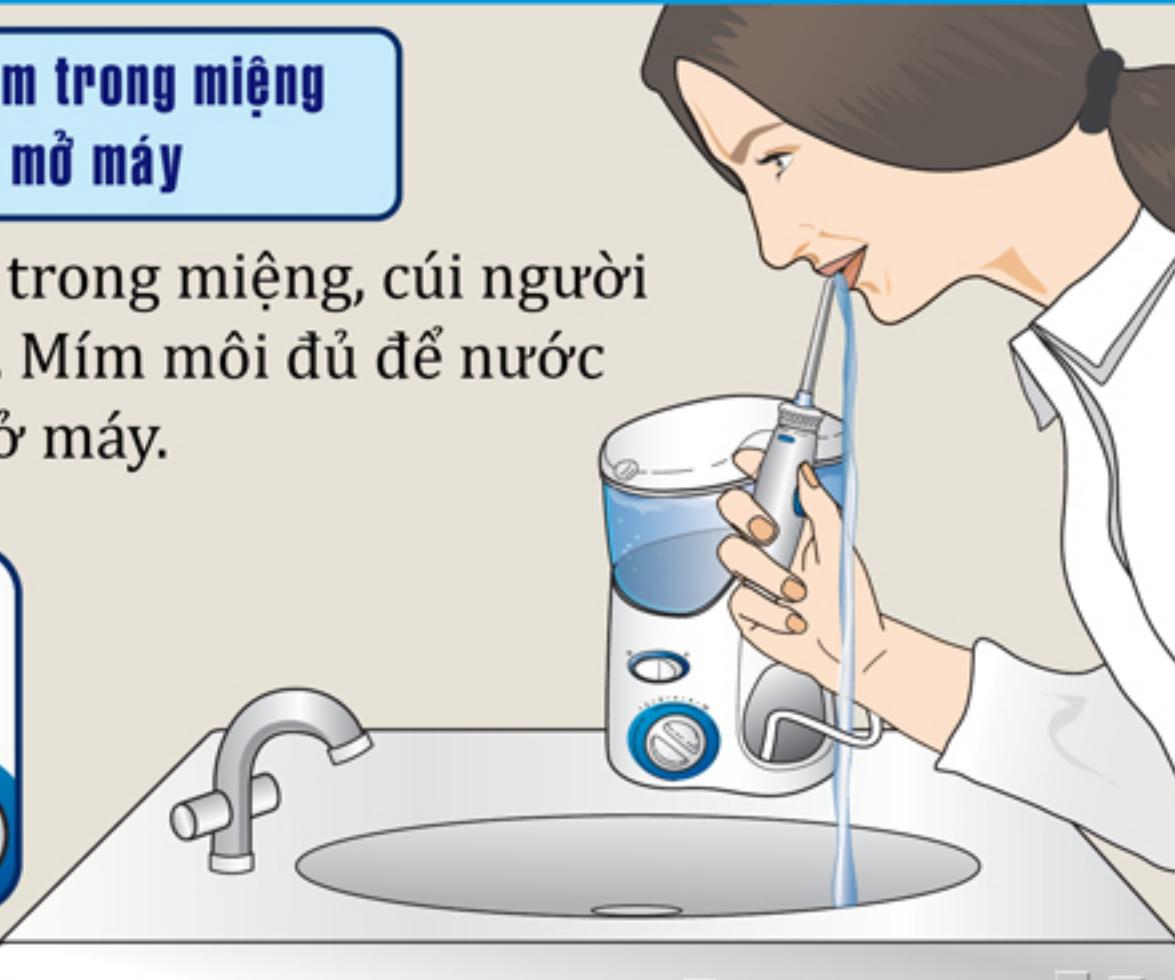


Hướng đầu tăm sao cho tia nước vuông góc với răng.



Bắt đầu với răng ở trong cùng, di chuyển đầu tăm theo đường nướu. Dừng lại một thời gian ngắn giữa các kẽ răng. Tiếp tục cho đến khi mọi điểm xung quanh và các kẽ răng được làm sạch.

6

THÁO ĐẦU TĂM

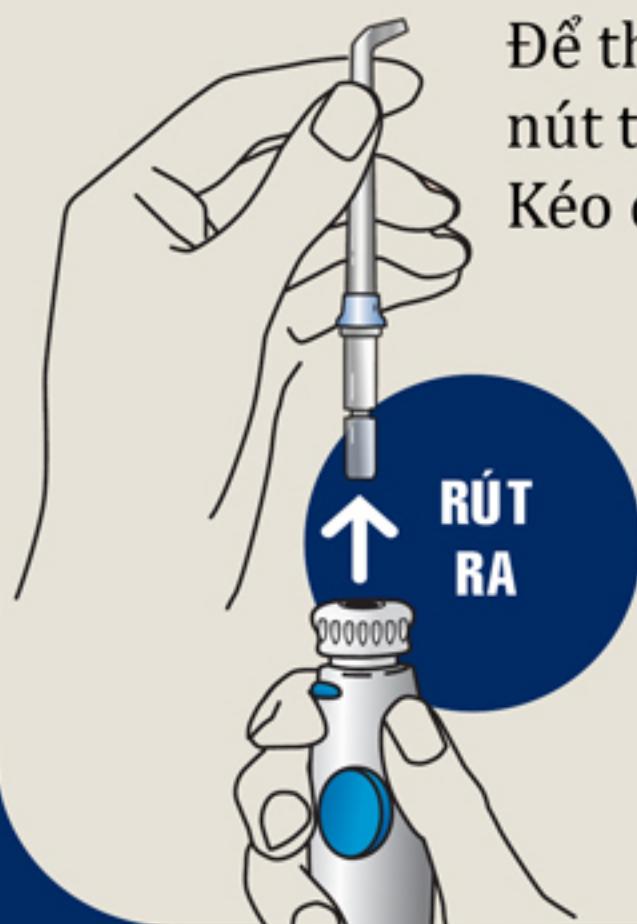

Để tháo đầu tăm, ấn và giữ nút tháo đầu tăm trên tay cầm. Kéo đầu tăm ra khỏi tay cầm.



7

KHI SỬ DỤNG XONG

Tắt máy và đổ hết nước trong bình ra.



Các thông tin liên quan đến sản phẩm và phụ kiện thay thế xin liên hệ:
Điện thoại: 09.2527.5678. Website: www.waterpik.vn